

PRODUKTDATABLAD

PolyMem finger/tå bandage med og uden sølv, steril

Klar-til-brug-bandage designet til optimal behandling af sår og skader på fingre og tæer.

Den velkendte inflammationsmodulerende, helende og smertelindrende effekt af PolyMem, som terapeutisk sårbehandlingssystem. Sikrer kontinuerlig rensning af såret og opretholder det fugtige sårmiljø, hvilket reducerer behovet for soignering/debridering ved bandageskift. Hæmmer dannelsen af hæmatom og ødem, hvorved omfang af skaden reduceres og smerter lindres.

Kan anvendes til alle typer sår og skader på fingre og tæer:

- Akutte sår: hudafskrabninger, rifter, snitsår
- Traumatiske sår: pulpaskader, brandskader
- Kroniske sår, herunder diabetiske fod-/tå sår
- Post-operativ bandage på fingre og tæer
- Skader uden sår: kontusioner, forstuvninger etc.



Mål omkreds af tykkeste sted på finger/tå – vælg rette størrelse bandage. Finger/tå-længde måles og det overskydende materiale afklippes inden bandagen applikeres.


Tillader fri bevægelighed.

Kan enten sidde selv eller kantfikseres.

Bør af hensyn til væskehåndtering ikke dækkes af anden bandage.

Ved behov for ekstra væskehåndtering, anbefales at lægge en PolyMem WIC under bandage. Vælg da en størrelse større finger/tå-bandage.

Findes i 5 størrelser, med og uden sølv.

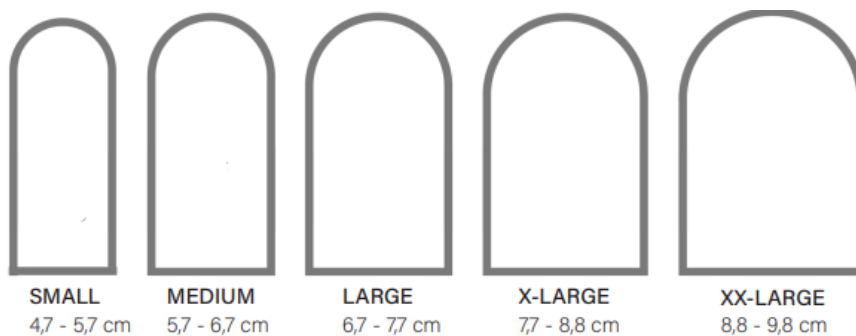

PRODUKTDATABLAD

PolyMem finger/tå bandage med og uden sølv, steril

Indholdsstoffer:	Polyurethan matrix, Polyurethanfilm, surfactant, glycerin, CO-polymer
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Nej
Holdbarhed uåbnet:	5år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Nej
Opbevaring:	Stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4279931	PolyMem	finger/tå skumbandage u/klæb str S, steril	omkreds 4 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	4401
4279932	PolyMem	finger/tå skumbandage u/klæb str M, steril	omkreds 6 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	4402
4279933	PolyMem	finger/tå skumbandage u/klæb str L, steril	omkreds 8 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	4403
4279962	PolyMem	finger/tå skumbandage u/klæb str XL, steril	x-large	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	4404
4279963	PolyMem	finger/tå skumbandage u/klæb str XX-L, steril	xx-large	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	4405
4279934	PolyMem Silver	skumbandage m. sølv, finger/tå, steril	x-large	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	1404
4279935	PolyMem Silver	skumbandage m. sølv, finger/tå, steril	xx-large	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	1405
4279947	PolyMem Silver	skumbandage m. sølv, finger/tå, steril	omkreds 4 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	1401
4279948	PolyMem Silver	skumbandage m. sølv, finger/tå, steril	omkreds 6 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	1402
4279949	PolyMem Silver	skumbandage m. sølv, finger/tå, steril	omkreds 8 cm	æske a 6 stk - krt a 5 æsker	1403