

Dansac Nova 1 FoldUp pose (med kulfilter)

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
 Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
 Land: Danmark
 Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Mediq Danmark A/S
 Adresse: Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby
 Tlf. nr.: 3637 9100
 Fax nr.: 3641 4415
 E-mail: mediqdanmark@mediqdanmark.dk
 Website: www.mediqdanmark.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: ISO 9001:2008 og ISO 13485:2003

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 1 FoldUp

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polyester nonwoven, Aktivt kul, PTFE membran PVC:
PET, PA, PP
 Hvis PVC, angiv blødgørere: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen

Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen

Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej:

Ja:

Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen

Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 1 FoldUp poser


Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
825-15	825-16	5709817387995	Dansac Nova 1 FoldUp Mini, tømb.farvet	15-60	30 stk	10 æsker	-	nej
826-15	03-80-195	5709817388022	Dansac Nova 1 FoldUp Mini, tømb.klar	15-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-15	03-87-900	5709817348545	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	15-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-20	03-87-902	5709817348576	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	20-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-25	03-87-904	5709817348606	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	25-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-30	03-87-906	5709817348637	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	30-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-35	03-87-908	5709817348668	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	35-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-40	03-87-910	5709817348699	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	40-60	30 stk	10 æsker	-	nej
823-45	03-87-912	5709817348750	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.farvet	45-60	30 stk	10 æsker	-	nej
824-15	03-87-914	5709817348729	Dansac Nova 1 FoldUp Midi, tømb.klar	15-60	30 stk	10 æsker	-	nej
815-15	03-80-200	5709817412734	Dansac Nova 1 FoldUp Maxi, tømb.farvet	15-90	10 stk.	10 æsker	-	nej
816-15	03-80-205	5709817412949	Dansac Nova 1 FoldUp Maxi, tømb.klar	15-90	10 stk.	10 æsker	-	nej
861-15	03-80-115	5709817376944	Dansac Nova 1 FoldUp X3, tømb.farvet	15-46	10 stk	10 æsker	-	nej
861-20	03-80-120	5709817376975	Dansac Nova 1 FoldUp X3, tømb.farvet	20	10 stk.	10 æsker	-	nej
861-25	03-80-125	5709817377002	Dansac Nova 1 FoldUp X3, tømb.farvet	25	10 stk.	10 æsker	-	nej
861-30	03-80-130	5709817377033	Dansac Nova 1 FoldUp X3, tømb.farvet	30	10 stk.	10 æsker	-	nej
861-35	03-80-135	5709817377064	Dansac Nova 1 FoldUp X3, tømb.farvet	35	10 stk	10 æsker	-	nej
862-15	03-80-145	5709817377125	Dansac Nova 1 FoldUp X3, tømb.klar	15-46	10 stk	10 æsker	-	nej
881-25	03-80-151	5709817377187	Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex, tømb.farvet	25	10 stk	10 æsker	-	nej
881-30	03-80-152	5709817377217	Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex, tømb.farvet	30	10 stk	10 æsker	-	nej
881-35	03-80-153	5709817377248	Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex, tømb.farvet	35	10 stk	10 æsker	-	nej
882-25	03-80-160	5709817380675	Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex, tømb.klar	25	10 stk	10 æsker	-	nej
882-30	03-80-161	5709817380880	Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex, tømb.klar	30	10 stk	10 æsker	-	nej
882-35	03-80-162	5709817380972	Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex, tømb.klar	35	10 stk	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 1 FoldUp poser

Produktinformation

- Anvendelsesområde:** Ileostomi.
Dansac Nova 1 tømbare poser (en-dels produkt) har 2 posekamre for ekstra filterbeskyttelse, der er specielt designet til ileostomier og til brug om natten. Den afkortede posefilm i det 70mm brede udløb letter tømning.
- Filter:** Nova dobbelt lags filter af 100% aktivt kul, har en gennemstrømningskapacitet på 57 liter.
En ydre teflon membran beskytter filteret mod lækage gennem filteret og beskytter filteret udefra mod fugt.
- Posefilm:** Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.
- Backing:** Posen har en non-woven stofbeklædning på begge sider der er vandafvisende.
- Basisplade:** Nova 1 FoldUp:
Gradueret plade. 1,1mm omkring stomien og 0,4mm ved kanten.
- Nova 1 FoldUp X3:
Gradueret plade. 3,3mm omkring stomien og 1,1mm ved kanten.
- Nova 1 FoldUp Soft Convex
Gradueret plade. 5,3mm omkring stomien og 1,1mm ved kanten.
- Sortiment:**

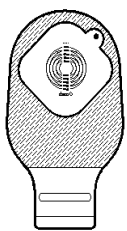

Dansac Nova 1 FoldUp Mini
Lukning: integreret lukning
Kapacitet farvet: 290 ml
Kapacitet klar: 300 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 825-15 (B)
Symmetrisk, klar: Ref 826-15 (B)

Dansac Nova 1 FoldUp Midi
Lukning: integreret lukning
Kapacitet farve: 430 ml
Kapacitet klar: 470 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 823-15 til 823-45. (A)
Symmetrisk, klar: Ref 824-15. (B)

Dansac Nova 1 FoldUp Maxi
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 800 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 815-16 (B)
Symmetrisk, klar: Ref 816-15. (B)

Dansac Nova 1 FoldUp X3
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 650 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 861-20 til 861-35. (A)
Symmetrisk, klar: Ref 862-15. (B)

Dansac Nova 1 FoldUp Soft Convex
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 650 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 881-25 til 881-35. (C)
Symmetrisk, klar: Ref 882-25 til 882-35. (C)

- (A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.
- (B) Findes i opklippelig
- (C) Findes i faste hulstørrelser