



at the heart of healthcare

STERIKING® dobbelte ark består af to sammensvejsede STERIKING® SMX ark i hver sin farve. Kombinationen af de to farver gør det nemt at opdage eventuelle materialefejl, og det letter samtidig pakkeprocessen, når ydre og indre lag er svejset sammen. De dobbelte ark består hver især af fem lag SSMMS-folie, og de er svejset sammen med ultralyd i to af siderne. De er velegnede til damp- og gassterilisering, og serien findes i tre versioner - Serie 1 light, Serie 2 regular og Serie 4 super. Det hvide ark har altid samme tykkelse = 47gsm, mens det blå er henholdsvis 37, 47 og 75 gsm. Alle ark i serien kan vendes og bruges med enten den blå eller hvide side udad.

STERIKING® ProWraps er udviklet til brug som indpakning af sterile pakker med kirurgiske instrumenter og genstande, der skal steriliseres med damp, EO- og FO-gas eller gasplasma. De er velegnede til alle formål, selv de mest krævende, på grund af flerlagsstrukturen. Produkterne er kun til engangsbrug.

Exceptionel holdbarhed og beskyttelse

- Fem-lags (SSMMS) som giver den højeste beskyttelse mod punktur, rifter og slitage
- Antistatisk
- Minimalt fnuggende

Optimal blødhed og draperingsevne

- Brugervenligt design; Steriking® dobbelte ark er bløde og skånsomme for hænderne, og har meget lav hukommelse. Meget let at drapere, folde og håndtere

Egnet til de fleste sterilisationstyper

- Valideret til både damp, EO, FO, og VH2O2 sterilisationsprocesser = nedsætter risiko for fejl i materialevalg

Effektiv sterilisation, Høj mikrobiel barriere

- Grundigt testet for sterilisationsemnets gennemtrængning, den mikrobielle barriere og bakteriel filtrationseffektivitet i henhold til BFE, industrielle standarder
- Har meget høje retentionsrater, som sikrer en pålidelig mikrobiel barriere i selv de mest krævende scenarier

Mediq Danmark A/S



at the heart of healthcare

T +45 3637 9200 | Kornmarksvej 15-19, DK-2605 Brøndby

mediqdanmark.dk

Steriking® dobbeltsvejsede ark

Serie 1 , 2 og 4


STERIKING® dobbeltsvejsede ark,serie 1 (SMX 37gsm blå + SMX 47gsm hvid)

Varenummer/ref.	Str (cm)	Stk pr krt
0103680 / BW1060	60 x 60	288
0103681 / BW1075	75 x 75	104
0103682 / BW1090	90 x 90	104
0103683 / BW1100	100 x 100	88
0103684 / BW1120	120 x 120	72
0103685 / BW1140	140 X 140	64



STERIKING® dobbeltsvejsede ark, serie 2 (SMX 47gsm blå + SMX 47gsm hvid)

Varenummer/ref.	Str (cm)	Stk pr krt
0103686 / BW2060	60 x 60	256
0103687 / BW2075	75 x 75	96
0103688 / BW2090	90 x 90	96
0103689 / BW2100	100 x 100	88
0103690 / BW2120	120 x 120	64
0103691 / BW2140	140 x 140	56

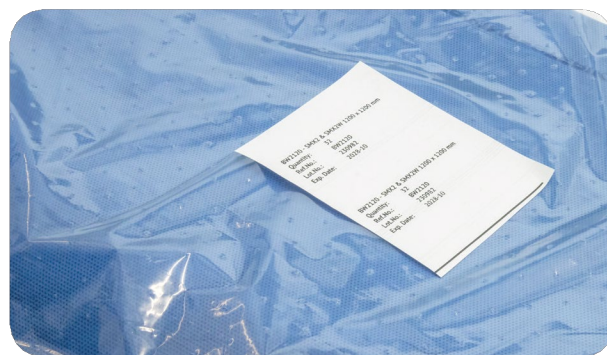

STERIKING® dobbeltsvejsede ark, serie 4 (SMX 75gsm blå + SMX 47gsm hvid)

Varenummer/ref.	Str (cm)	Stk pr krt
0103692 / BW4060	60 x 60	208
0103693 / BW4075	75 x 75	80
0103694 / BW4090	90 x 90	80
0103695 / BW4100	100 x 100	72
0103696 / BW4120	120 x 120	56
0103697 / BW4140	140 x 140	48



Wipak Oy
Wipaktie 2
FI-15560 Nastola